



SEDIA PORTANTINA SCENDISCALE PIEGHEVOLE

4BELL STAIR+

CARATTERISTICHE

- Il telaio in alluminio rende la sedia leggera e resistente allo stesso tempo.
- 2 slitte ad alta aderenza aiutano a scendere le scale in maniera sicura e controllata.
- Il maniglione estensibile offre maggiore controllo durante la discesa delle scale.
- 2 maniglie anteriori telescopiche e due maniglie posteriori pieghevoli facilitano il sollevamento della sedia.
- Il meccanismo di blocco delle ruote posteriori rende più sicuri i movimenti su superfici piane.
- La seduta semirigida e lo schienale imbottito aumentano il comfort del paziente.
- Il poggiatesta pieghevole aumenta la stabilità del paziente.
- Le ruote anteriori girevoli rendono la sedia ancora più manovrabile.
- Seduta e schienale in PVC sono resistenti ai disinfettanti chimici.



— Conforme a standard —
☒ EN 1865-4 ☒ EN 1789

4BELL STAIR+ è una sedia portantina scendiscalle leggera e pieghevole destinata al trasferimento o all'evacuazione di pazienti con mobilità ridotta da edifici a più piani. Due slitte ad alta aderenza aiutano a scendere le scale in modo sicuro e controllato.

È costruita secondo le specifiche della norma UNI EN 1865-4 ed è conforme alla norma UNI EN 1789 se ancorata al sistema di fissaggio dedicato 4BELL Stair+ Max. La struttura della sedia è in alluminio. Il peso complessivo è di 14,7 kg.



DATI TECNICI


Codice	ST10501
Lunghezza con maniglie telescopiche retratte / estratte	76 / 112 cm
Lunghezza con slitte e maniglie telescopiche estratte	128 cm
Larghezza	49 cm
Altezza	94 cm
Altezza con maniglione estensibile estratto	147,5 cm
Dimensioni ripiegata	29 x 49 x 95 cm
Peso	14,7 kg
Capacità di carico	180 kg
Ruote anteriori	ø 10 cm
Ruote posteriori	ø 15 cm
Materiali	Al, Acciaio, PU, PVC
Colore sedile	

Nota: Dimensioni e peso sono soggetti a tolleranze rispettive di ± 1 cm e $\pm 0,2$ kg.

IL PRODOTTO INCLUDE

- Cinture di trattenuta.

SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIESTO

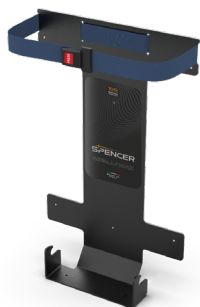

ST10455

4BELL STAIR+ MAX

Sistema di fissaggio
testato 10G

ACCESSORI



ST10452	Seduta XL
ST10450	Braccioli
ST10451	Maniglie posteriori ausiliarie
ST10454	Poggiatesta 4BELL Stair+



Rev.0 (02/03/2026)
COPIA NON CONTROLLATA

©Diritto d'autore - Questo documento è di proprietà di SPENCER ITALIA SRL e non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza autorizzazione scritta da parte di SPENCER ITALIA SRL.

Spencer Italia s.r.l. a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n° 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - +39 0521 541111 - info@spencer.it - www.spencer.it