

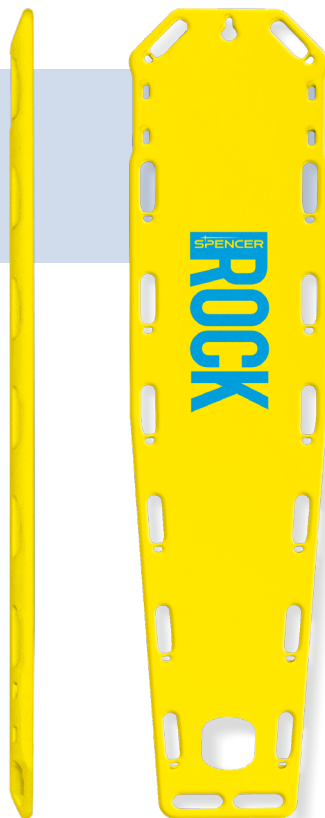


TAVOLA SPINALE CON PIN

ROCK PIN

CARATTERISTICHE

- La struttura robusta e leggera di Rock Pin garantisce resistenza agli urti.
- Può galleggiare ed essere utilizzata per il soccorso in acqua.
- Il numero, il posizionamento e la forma delle maniglie semplificano le operazioni di soccorso.
- La forma rastremata è adatta per lo stoccaggio.
- I fori offrono numerosi punti di fissaggio per le cinture a ragno e gli immobilizzatori per la testa.
- La superficie in polietilene è facile da pulire.
- Consente la diagnosi preliminare RX, RM, TC.
- Con il sistema Spencer Mark Up puoi etichettare la tavola spinale e ridurre al minimo il rischio di perderla.



Dispositivo medico di Classe I conforme al Regolamento (UE) 2017/745 MDR

ROCK PIN è una tavola spinale progettata per immobilizzare e trasportare pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale. Realizzata in un unico pezzo di polietilene ad alta densità iniettato con poliuretano espanso, offre grande resistenza, è impermeabile e adatta per il soccorso in acqua. Può supportare fino a 350 kg. È compatibile con qualsiasi sistema standard di cinghie a ragno o immobilizzatore per la testa.

350 kg



**CAPACITÀ
DI CARICO**



7,3 kg

PESO



**SISTEMA
MARK-UP**



**INGOMBRO
RIDOTTO**

DATI TECNICI

Codici	ST02010	ST02012	ST02013	ST02014
Lunghezza	186 cm	186 cm	186 cm	186 cm
Larghezza	44,5 cm	44,5 cm	44,5 cm	44,5 cm
Spessore	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Peso	6,7 kg	6,7 kg	6,7 kg	6,7 kg
Maniglie	16	16	16	16
Fori	14	14	14	14
Capacità di carico	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Materiale	PE	PE	PE	PE
Colore				

Nota: Le dimensioni e il peso sono soggetti a tolleranze di ± 1 cm e $\pm 0,3$ kg.



SISTEMA DI FISSAGGIO RACCOMANDATO




ST02105

FIX BOARD
 Sistema di fissaggio
 10G verticale per tavole
 spinali



ST02108

FIX BOARD
 Sistema di fissaggio
 10G orizzontale per tavole
 spinali

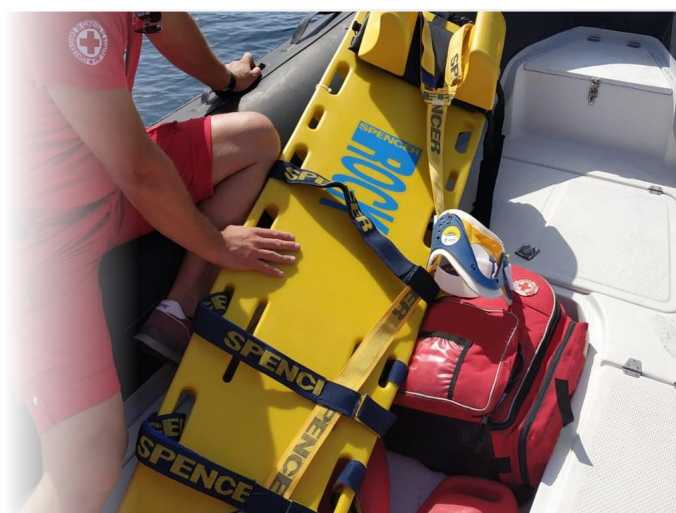


ACCESSORI



ST02015

PIN STRAPS
 Sistema di cinghie con ganci

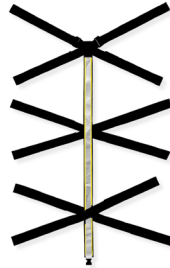

ST02022

ECS STRAPS
 Sistema di cinghie per la tavola spinale e per il materasso



ST02035

ROCK STRAPS
 Sistema di cinture universali per tavole spinali



ST02039

T-STRAPS
 Sistema universale di cinghie per tavole spinali



SH00201

SPENCER CONTOUR
 Immobilizzatore universale anatomico per la testa



SH00203

SPENCER CONTOUR HP
 Immobilizzatore universale anatomico per la testa



SH00260

PEDI FIX
 Immobilizzatore per la testa pediatrico



SH00110

SUPER
 Immobilizzatore universale compatto blu per la testa



SH00162

SUPER BLUE HP
 Immobilizzatore testa universale

ACCESSORI**ST02106**

MARK UP
Sistema di
personalizzazione
permanente

**SH00240**

TANGO FIX
Immobilizzatore
della testa per adulti/
pediatrici

**SH00246**

TANGO FIX HP
Immobilizzatore
della testa per adulti/
pediatrici

**SH00151**

FXA PRO
Immobilizzatore
universale anatomico
per caviglia

**ST00494**

STX 494
Cintura con fibbia
in metallo con
moschettone - 2 pezzi

**ST02102**

SPINE PACK
Borsa per il trasporto
della tavola dorsale
vuota